

N° de série : 843820045	N° Document : 84V12 / DDUTSCHER
Référence : Sorenson OneTouche - 10 / Ref Dutscher: 112740	Mise en service : Date : 23/08/2012
Modèle : OneTouche - var. 0.5-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 09:50:09
Constructeur : SORENSON	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 1 µl

Moyenne : 0,987 µl	Minimum : 0,969 µl	Maximum : 1,012 µl		
Erreur systématique Ev : -0,013 µl	E% : -1,32 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,012 µl	CV% : 1,18 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
0,974	0,974	0,984	0,987	0,982
0,988	0,990	0,966	1,009	0,983

Volume : 5 µl

Moyenne : 5,036 µl	Minimum : 5,014 µl	Maximum : 5,046 µl		
Erreur systématique Ev : 0,036 µl	E% : 0,73 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl	CV% : 0,17 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
4,998	5,023	5,020	5,021	5,020
5,028	5,019	5,021	5,030	5,023

Volume : 10 µl

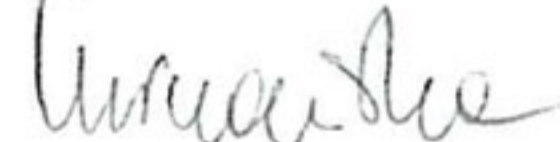
Moyenne : 10,103 µl	Minimum : 10,092 µl	Maximum : 10,113 µl		
Erreur systématique Ev : 0,103 µl	E% : 1,03 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,007 µl	CV% : 0,07 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
10,060	10,060	10,072	10,070	10,070
10,070	10,070	10,081	10,080	10,072
10,077				

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) **Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011**
méthode gravimétrique : procédure PLM050 **référentiel : ISO 8655**

Température : 22,2 °C

Pression : 999,7 hPa

Hygrométrie : 62,5 %

Pointe : ClearLine 028200CL **Evaporation :** 0 mg
ClearLine 035200CL (Low Binding)

Facteur : 1,0032 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285