

N° de série : 12569807	N° Document : 11V12/ DD1000
Référence : Biohit 725 - 1000 / Ref Dutscher: 070433	Mise en service : Date : 10/12/2012
Modèle : mLINE - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 11:14:18
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 100 µl

Moyenne :	100,38 µl	Minimum :	99,95 µl	Maximum :	100,80 µl		
Erreur systématique	Ev : 0,38 µl	E%	0,38 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,23 µl	CV%	0,23 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	99,65	100,06	100,11	99,92	100,01	100,32	99,98 100,05 100,22 100,50

Volume : 500 µl

Moyenne :	496,43 µl	Minimum :	495,61 µl	Maximum :	496,87 µl		
Erreur systématique	Ev : -3,57 µl	E%	-0,71 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,39 µl	CV%	0,08 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	494,82	495,28	494,76	494,71	495,38	495,10	494,79 494,13 495,16 495,36

Volume : 1000 µl

Moyenne :	993,14 µl	Minimum :	991,98 µl	Maximum :	993,80 µl		
Erreur systématique	Ev : -6,86 µl	E%	-0,69 %	Tolérance E :	8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,53 µl	CV%	0,05 %	Tolérance S :	3 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)	990,09	990,79	990,83	990,48	990,26	990,25	990,12 989,74 990,15 989,01

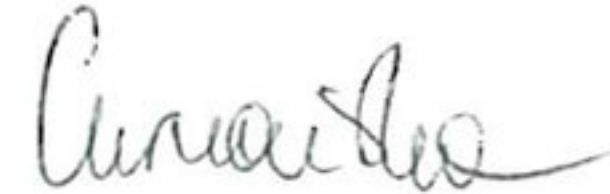
Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion

**CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius LE225D n°19002435

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)  
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011  
référentiel : ISO 8655

Température : 21,4 °C

Pression : 995 hPa

Hygrométrie : 57,3 %

Pointe : ClearLine Ref.134750CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,003 µl/mg

Pointe : ClearLine Ref.134760CL

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285